


ES. DA SVOLGERE A LEZIONE su TITOLAZIONI - Testo

Esercizio 1 ACIDO-BASE. Standardizzazione NaOH

Si deve standardizzare una soluz. di **NaOH** circa **0.1 M** da usare come titolante. A tale scopo si fa reagire la soluz. con quantità accuratamente pesate di **ftalato acido di potassio** (KHP) e si calcola la molarità esatta di NaOH (M_m KHP 204.233 g mol⁻¹)

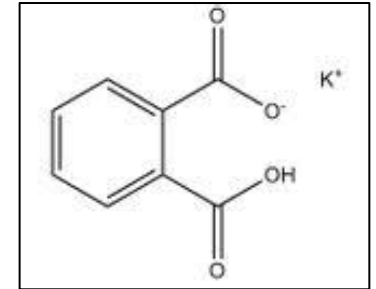

a. 0.8104 g di KHP reagiscono esattamente con 38.51 mL di NaOH x M.

Calcolare la molarità x_1 della soluzione

b. Per avere un valore di concentrazione standard più preciso si ripete la procedura altre 3 volte: per ogni singola prova una quantità accuratamente pesata di standard primario viene sciolta e fatta reagire con NaOH fino a neutralizzazione. Le quantità misurate sperimentalmente di reagenti sono:

- Seconda prova: KHP 0.7987 g e NaOH 38.29 mL
- Terza prova: KHP 0.8365 g e NaOH 39.96 mL
- Quarta prova: KHP 0.8039 g e NaOH 38.29 mL

Calcolare i valori sperimentali di molarità x_2 , x_3 , x_4 risultanti per la soluzione di NaOH e la molarità media

ES. DA SVOLGERE A LEZIONE su TITOLAZIONI - Testo

Esercizio 2 REDOX. Titolazione con KMnO_4

1.456 g di un campione di una lega di composizione non nota sono disciolti in un acido e la soluzione è portata a volume a 100 mL.

Calcolare la % di ferro nel campione sapendo che la titolazione di un'aliquota di 20.00 mL della soluzione richiede (come media) 33.45 mL di una soluzione 0.01005 M di KMnO_4

(si ricordi che il Fe reagisce con MnO_4^- in rapporto 5:1)


ES. DA SVOLGERE A LEZIONE su TITOLAZIONI - Testo

Esercizio 3 PRECIPITAZIONE. Titolazione con AgNO_3

1.354 g di un campione di NaNO_3 contaminato con NaCl sono disciolti in una piccola quantità di acqua e la soluzione è portata a volume a 100 mL in matraccio.

Per titolare il cloruro in 10.00 mL di soluzione, sono usati 35.70 mL di una soluzione 0.01021 M di AgNO_3 .

Calcolare la purezza percentuale del campione ricordando che:

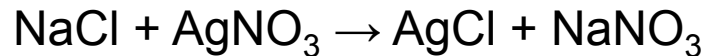

$$M_m \text{ NaCl} = 58.33 \text{ g/mol}$$

ES. DA SVOLGERE A LEZIONE su TITOLAZIONI - Testo

Esercizio 4 COMPLESSOMETRIA. Titolazione con EDTA

In ogni punto della titolazione possiamo calcolare il valore di pM ($= -\log[M_{n+}]$).

Si consideri per esempio la titolazione di 50.0 mL di una soluzione 0.0050 M di Ca^{2+} con una soluzione di EDTA 0.0100 M EDTA a pH = 10.

Calcolare il pM nei seguenti casi:

- Prima dell'aggiunta dell'EDTA
- Dopo l'aggiunta di 10.0 mL di EDTA
- Al punto equivalente, sapendo che a pH 10, $\alpha_Y = 0.36$ e $K'_{\text{CaY}} = 0.36 \times K_{\text{CaY}} = 1.8 \times 10^{10}$
- Dopo l'aggiunta di 50 mL di EDTA


e “disegnare” una possibile curva di titolazione sulla base dei calcoli di sopra

ES. DA SVOLGERE A LEZIONE SU TITOLAZ. - **Svolgimento**

Esercizio 1 ACIDO-BASE. Standardizzazione NaOH

Svolgimento

a. Si ricorda che lo ftalato acido di potassio è un sale, forma anfotera dell'acido ftalico (diprotico). In presenza di una base forte si comporta quindi come un acido monoprotico a dare lo ione ftalato secondo la reazione:

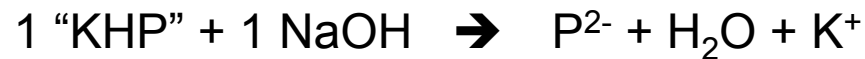

Quindi:

$$\frac{\text{Massa std primario}}{M_m \text{ (std primario)}} = \text{mol}_{\text{std primario}} = \frac{1}{1} \text{ mol}_{\text{titolante}} = 3.968017 \text{ mmol}_{\text{NaOH}}$$

$$\frac{\text{mmol}_{\text{NaOH}}}{\text{mL}_{\text{NaOH}}} = X_1 = 0.1030 \text{ M}$$

ES. DA SVOLGERE A LEZIONE SU TITOLAZ. - **Svolgimento**

...ancora **Esercizio 1 ACIDO-BASE. Standardizzazione NaOH**

b. Analogamente al punto a. otteniamo:

$$x_1 = 0.103039 \text{ M} \quad x_2 = 0.102134 \text{ M} \quad x_3 = 0.102498 \text{ M} \quad x_4 = 0.102799 \text{ M}$$

Media: NaOH 0.1026 M

Nota: nessuno dei valori calcolati è il valore “vero” ma il risultato medio di più misure è più preciso (riproducibile) e affidabile del risultato di una singola misura.

ES. DA SVOLGERE A LEZIONE SU TITOLAZ. - **Svolgimento**

Esercizio 2 REDOX. Titolazione con KMnO_4

Svolgimento

33.45 mL di una soluzione 0.01005 M di KMnO_4 contengono:

$$0.03345 \text{ L} \times 0.01005 \text{ M} = 3.362 \times 10^{-4} \text{ moli di titolante}$$

Il Fe reagisce con MnO_4^- in rapporto 5:1, quindi un'aliquota di 20.00 mL contiene:

$$5 \times 3.362 \times 10^{-4} = 1.681 \times 10^{-3} \text{ mol di Fe}$$

Poiché nella soluzione diluita ci sono esattamente 5 aliquote (100.00 mL vs. 20.00 mL), la quantità di Fe nel campione è:

$$5 \times 1.681 \times 10^{-3} = 8.404 \times 10^{-3} \text{ moli,}$$

$$\text{e quindi in massa si ha: } 55.854 \text{ g/mol} \times 8.404 \times 10^{-3} \text{ mol} = 0.4693 \text{ g}$$

Questo significa che **nel campione della lega c'è una percentuale di ferro di:**

$$0.4693 \text{ g}/1.456 \text{ g} \times 100\% = \mathbf{32.23\%}$$